


IMÁN

MARCAPASOS + IMÁN

**Activa la
estimulación
asincrónica.**

DEFIBRILADOR IMPLANTABLE + IMÁN

**Desactiva la
detección de
taquiarritmias
No afecta la función
de estimulación.**

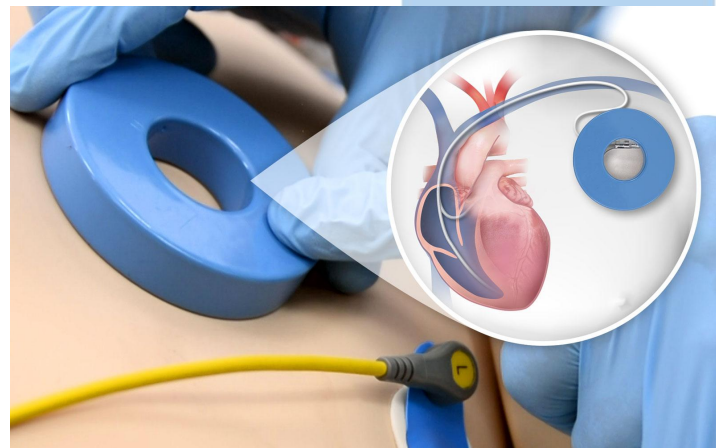

La respuesta al imán es temporal, y la función normal del dispositivo se reanuda una vez que se retire el imán.



Medtronic, Boston Scientific and Biotronik

- Recomiendan colocar el imán directamente sobre el dispositivo.

St. Jude/ Abott:

- El imán debe colocarse desplazado, con la curvatura del imán posicionada sobre la parte superior o inferior del dispositivo





Además de ponerlo en la posición correcta, el dispositivo emite un sonido (dependiendo de la casa comercial)

RESPUESTA DEL MARCAPASOS AL IMÁN

Modo de estimulación asincrónica

Frecuencia fija mientras el
imán está en su lugar

Se inhabilita la detección
de la actividad cardíaca
intrínseca

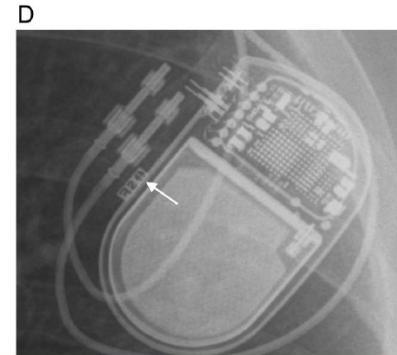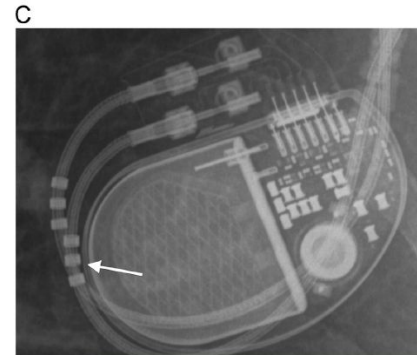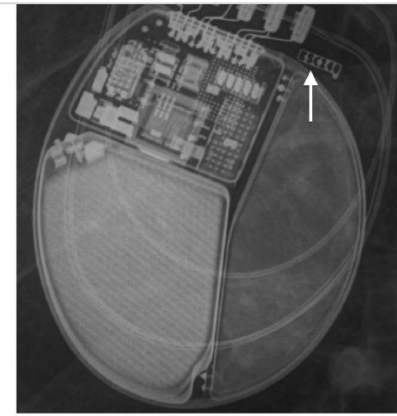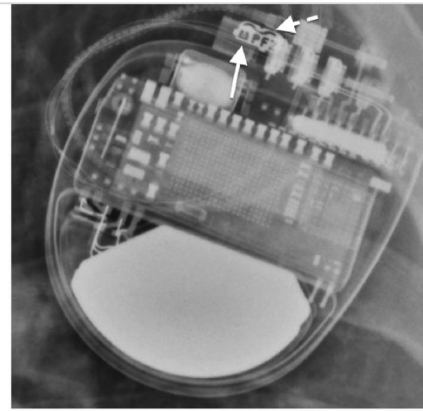

Medtronic

Al ponerle imán queda
asincrónico a 85 lpm.

St. Jude/Boston Scientific

Al ponerle imán queda
asincrónico a 100 lpm.

Biotronik

Al ponerle imán queda
asincrónico a 90 lpm.



IDENTIFICAR POSICIÓN DE IMÁN

1

(marcar si es posible)



2



3



